

PIEDRAS DE ARKANSAS



Muy usada para el pulido de las obturaciones de composite

COMPLEMENTOS PARA EL PULIDO

- PASTAS DE PULIDO



- ESCOBILLAS



PASTAS PARA PULIDO DE RESINAS



USO:

- Colocar una pequeña porción de la pasta pulidora en el interior de una copa de pulido de grano extra fino.
- Se recomienda su uso junto con escobillas para obtener una superficie brillante.



CEPILLOS PULIDORES

- Son cepillos o escobillas especialmente diseñadas para **sacar brillo**
- Sus cerdas contienen di metacrilato de uretano impregnado con partículas de diamantes abrasivos.
- **Para contra ángulo**




Uso

Para su uso adecuado se recomienda:

❖ Si se usa una escobilla simple de profilaxis (cerdas de nylon trenzado) el uso de una pasta de pulido es obligatorio.




PROCEDIMIENTO PARA EL ACABADO Y PULIDO DE PIEZAS ANTERIORES

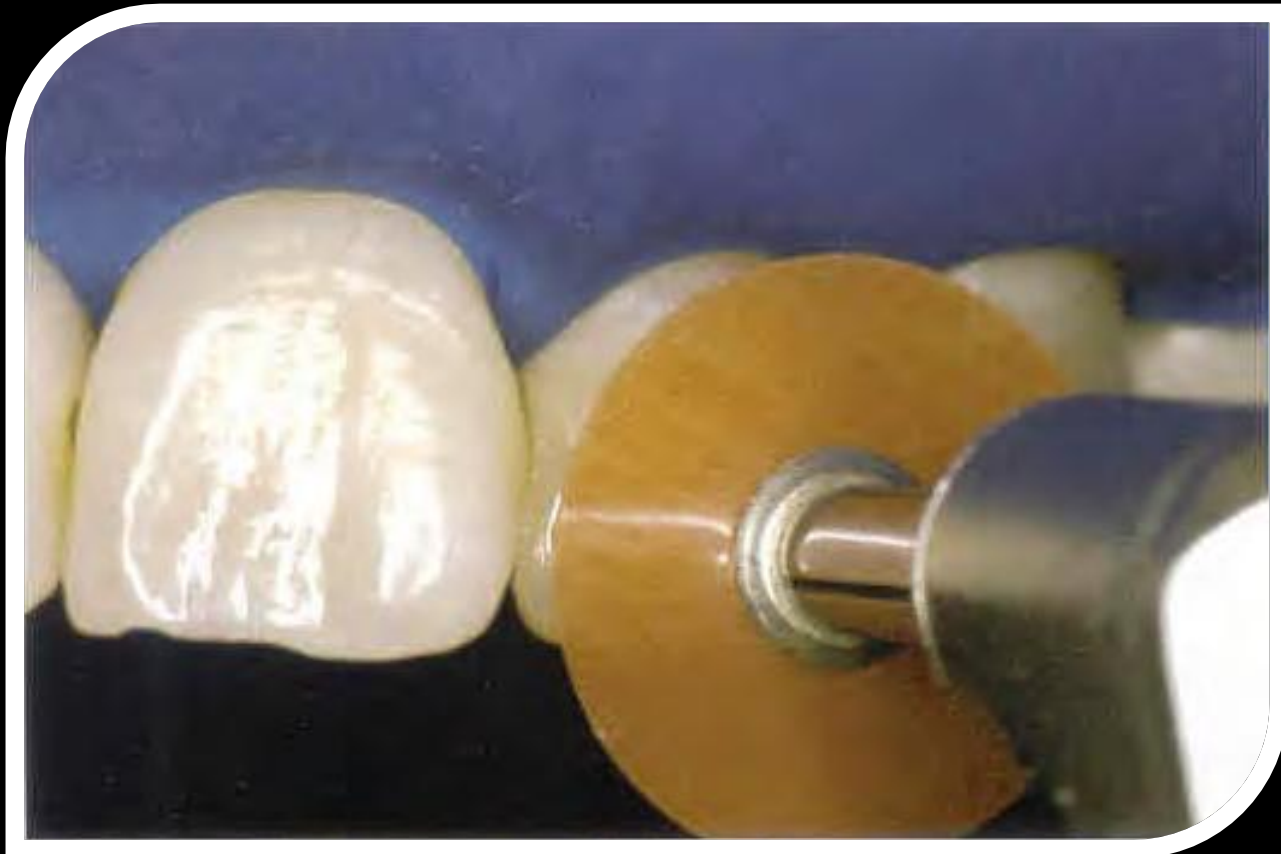

Forma y Alisado :

Elimine las rebabas y excesos de la resina con una hoja de bisturí

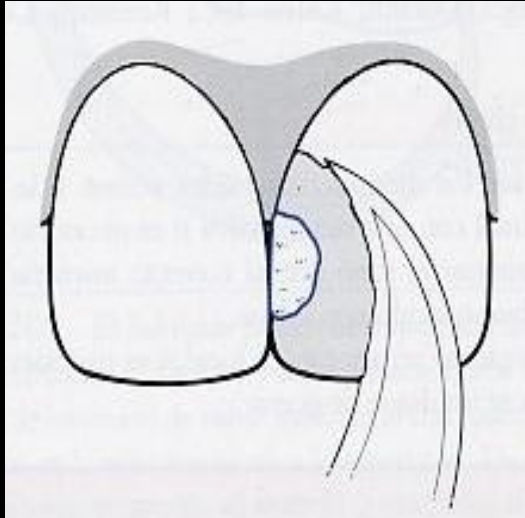

Bisturí: opcional

- Para redefinir la anatomía y mantener el perfil de emergencia del diente en restauraciones que involucren la zona cervical o proximal realizar el acabado con fresas multilaminadas de 12 hojas. Fresa de fisura, fresa bala, etc...

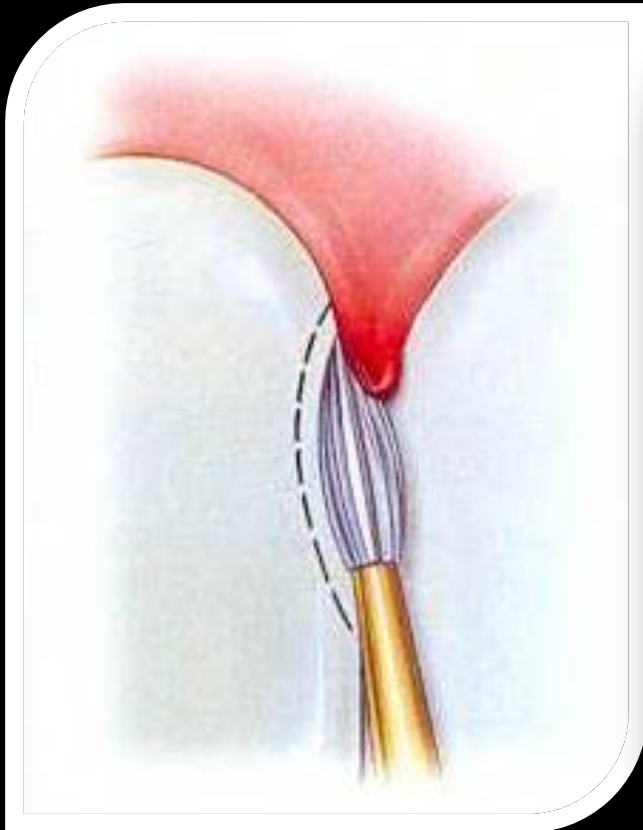





FIGURA 8.51. Para conformar los surcos de desarrollo en la superficie vestibular, se utiliza una fresa de carburo tungsteno.

Secuencia de (acabado y pulido) forma, alisado y brillo usando solo multilaminadas:

Hoja de 12 fillos para el acabado inicial



Hoja de 18 fillos para alisado y gran pulido

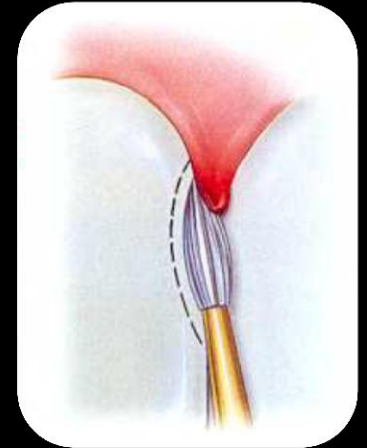

Hoja de 24 fillos para darle brillo a la restauración

Secuencia de acabado y pulido con discos Soflex:



Secuencia de acabado y pulido combinando sistemas:



FORMA



ALISADO



BRILLO

Combinando sistemas

